

**LINET**

# AVE 2

förlossningssäng



reddot award 2017  
winner

Välkommen till världen

# Resan börjar

Förlossningssängen AVE 2 passar perfekt för alla stadier under en förlossning, inklusive inledande värkar, förlossning, återhämtning och postpartum, så att patienten och hennes familj kan genomgå en normal förlossning i ett rum med hemkänsla.



Attraktiv och funktionsrik design ger ett utmärkt första intryck.



Snabb och enkel rengöring.

Extra låg höjdjustering (600 mm) gör det tryggt och säkert för patienten att ta sig upp i sängen och därför är den mycket lämplig för förlossningar.



Patienten kan fritt välja den bästa ställningen under förlossningen.



Den högsta höjden (1 050 mm) ger perfekt läge för perineal reparation.



Bekväm madrass för vila under återhämtningsstadiet. Med extra och lämpliga tillbehör kan sängen även användas under postpartumperioden.



FÖRLOSSNING

ÅTERHÄMTNING

# Fördelar med Ave 2



- Frihet att ändra förlossnings-ställning
- Säg ja till naturlig förlossning
- Maximal säkerhet för barnet och patienten



Patient

- Intuitivt och enkelt handhavande
- Kompromisslös hygien
- Minimala fysiska ansträngingar



Personal

- Attraktiv modern design
- Ökar vårdkvaliteten
- LDR- och LDRP-koncept



Ledningen

# Det magiska ögonblicket

## MER PLATS

En enkel ledad mekanism gör det snabbt och lätt att fälla in eller ut fotsektionen under förlossningen. Eftersom den sitter kvar på sängen förhindras risken för infektioner från golvet och personalens risk för ryggskador minskas genom att de inte behöver lyfta sektionen.



Detta är den del av sängen där du tack vare tekniska och innovativa lösningar får bättre arbetsergonomi och en komplex produkt för hela förfarandet.



När sektionen lutar kan den även användas som ett fotstöd.



Genom att skjuta den uppåt kan du snabbt ställa in sängen i vågrätt läge och samtidigt dra nytta av sektionens höga belastningskapacitet. Detta innebär att den också kan användas som en bred och bekväm yta för ett barn.

# Snabb justering

Benstödens stadiga konstruktion innebär att vårdpersonalen kan reagera mycket snabbt och effektivt på olika situationer som kan inträffa under förlossningen.



*Benstöden kan snabbt justeras till nödvändigt läge.*



*Brickans höjd kan justeras för olika lårbensstorlekar.*

*Fälls undan för att ge personalen enkel tillgång till patienten.*



## U-FORM

Den unika ovala formen som skapar det utrymme som behövs för åtkomst till bäckenbotten passar tätt ihop med förlossningsröret och minimerar därmed överföringsluckor.



## HANDTAG

Ökar patientens komfort under förlossningen.

*Det finns oberoende motordriven bäckenlutning för bättre upphöjning av svanskotan.*

## 4LIFT

En innovativ teleskoplösning ger extra låg höjd för säker ingång i sängen och extra höjd för behandling.



# Grindar

Grindarna är utrustade med kontrollpaneler och kan enkelt fällas undan när patienten flyttas mellan två sängar. Tystgående och enkel svängning med en hand. Inget behov av extra utrymme bredvid sängen. Grindarna fungerar som stöd för att hjälpa patienten att sätta sig upp.



## ENKLA REGLAGE

En integrerad kontrollpanel med tydliga illustrerade diagram och symboler för både patienten och vårdpersonalen. Sköterskan kan låsa rörelsefunktioner.

### Tillgängliga reglage:

1. Höjd- och lutningsjustering
2. Trendelenburg-läge
3. Spärreglage
4. Belysning under sängen (tillval)
5. Sköterskeanrop (tillval)



## HYGIEN OCH SÄKERHET

Hög hygienstandard och kompakt konstruktion av vissa delar av stödområdet, tillsammans med sängbasens plasthölje, minskar tidsåtgången vid rengöring av sängen.

1. Bakterieavstötande läder
2. Stoppning utan sömmar
3. Kompakt och separat utrymme
4. Elektrostatiskt målad med beläggning av epoxipulver mot korrosion

Förlossningsängens stadiga konstruktion omfattar inga skärande delar eller vassa kanter, vilket ökar vårdpersonalens säkerhet.



# Säkerhet





*Trendelenburg*



*HLR*

1. Trendelenburg och HLR
2. Extra reservbatteri
3. Lättdesinficerad ABS-plast
4. Spärreglage
5. Kolumnsystem utan saxlyft
6. Lättåtkomlig central broms
7. Enkla transporter med ledade hjul och skjuthandtag
8. Avtagbar huvudgavel för narkosläkaren (tillval)
9. Sköterskeanrop (tillval)
10. Lutande hållare för IV-stativ

# Frihet att ändra förlossni



*Litotomiläge*



*Sidoliggande*



*Halvliggande med fötterna mot benstöden*



*Upprätt*



*Halvliggande med fötterna på fotsektionen*



*Stödstång för nedhukat läge*

# ningsställning



*Läge på alla fyra*



*Halvt sittande med benhållarna*



*Halvt sittande med fotsektionen*



*Epiduralingrepp*



*Perineal reparation*



*Halvt sittande med hjälp från partner*

# Säg ja till naturliga förlossningar

En naturlig metod utan läkemedel vid värkar och förlossning är lämpligast när patienten vill behålla kontrollen över sin kropp i så stor utsträckning som möjligt, vara en aktiv deltagare under hela förlossningen och ha minimala rutinmässiga ingripanden. Med korrekta förberedelser och utmärkt stöd känner kvinnor sig ofta stärkta och mycket tillfredsställda med naturliga förlossningar. Det är anledningen till att vi säger JA till en naturlig förlossning med AVE 2.





## FÄRGALTERNATIV

Välj mellan olika färgalternativ för att matcha miljön och inredningen i förlossningsrummet.



*Blå*



*Gul*



*Orange*



*Grön*



*Violett*

# Tillbehör



*Avtagbar huvudgavel*



*Hink av rostfritt stål med hjul*



*Teleskopiskt IV-stativ*



*Fjärrkontroll*



*Belysning under sängen*




*Skjutbar 4,5 l skål av rostfritt stål*



*Övre madrass*



*Främre hållare*

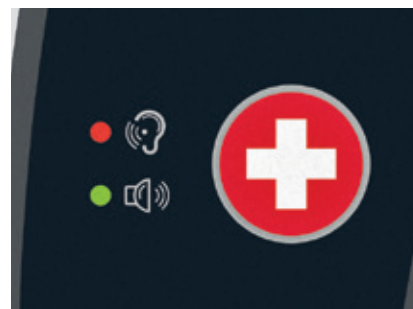

*Sköterskeanrop*



*Euro-lås*



*Klädd stödstång*



*Kussen*

# Parametrar



## TECHNICAL PARAMETERS

Liggytans totala längd	2 122 mm
Minimilängd i standardläge	1 570 mm
Full bredd	980 mm
Hjulstorlek	150 mm
Minimihöjd	600 mm
Maxhöjd	1 050 mm
Ryggsektion	-10° / +70°
Mittsektion	0° / +18,5°
Trendelenburg-läge	0° / -10°
Lodräta benstöd	0° / +135°
Vågräta benstöd	0° / +60°
Fotsektionens justeringsvinkel	0° / -22°
Maximal patientvikt	240 kg
Total produktvikt	245 kg

## ELEKTRISKA PARAMETRAR

Batterier – reserv	24 V / 1,2 Ah
Ingångsspänning	230 V
Motorspänning	24 V
Vätskeintrångsskydd för sängen	IPX4
Enhetsklass	I
Klassificering för applicerade delar: B	

## STANDARDUTRUSTNING

- Standardbenstöd med benremmar (par)
- Reservbatteri
- Skjutbar fotsektion, inklusive stoppning
- Madrass utan sömmar, med bakterieavstötande läder
- Elektrisk Trendelenburg och manuell HLR
- IV-stativhållare på båda sidor av sängen
- Grindar med reglage
- Kudde utformad för korsryggstöd
- Fast panel med reglage
- Handtag (par)
- 150 mm hjul, ett svängbart
- Central broms
- Ekvipotentiell kontakt
- Nätverkskabel
- Flera olika standardfärgalternativ
- Förpackning

# Ave 2

Patient

- Frihet att ändra förlossningsställning
- Säg ja till naturlig förlossning
- Maximal säkerhet för barnet och patienten



- Intuitivt och enkelt handhavande
- Kompromisslös hygien
- Minimala fysiska ansträngningar



Personal

Ledningen

- Attraktiv modern design
- Ökar vårdkvaliteten
- LDR- och LDRP-koncept



 wissner-  
bosserhoff

**LINET**

Members of LINET Group

## LINET Sweden AB

Vallgatan 5 | 170 67 Solna | Sweden

Tel.: 08-544 747 00 | e-post: [info@linet.se](mailto:info@linet.se) | [www.linet.se](http://www.linet.se)

